

Milí priatelia, zákazníci a partneri,

ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v roku 2015, v ktorom sme aj vďaka Vám pokračovali v úspechoch s našim systémom TomoCon PACS.

Prajeme Vám krásne a pokojné Vianoce a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2016.



pracovníci TatraMed Software s.r.o.


TomoCon® 21

diagnostika, archivácia a správa obrazových dát

(Stiahnuť TomoCon Workstation 21)

CPR – zakrivené MPR

- Špeciálny nástroj pre vizualizáciu rúrkovitých anatomických štruktúr na základe definovanej CPR cesty (cievy, miecha), ktorý umožňuje zobraziť zakrivenú MPR v ľubovoľnom smere a uhle v rámci série.
- Zobrazenie výsledku v režime natiahnutej alebo narovnanej rekonštrukcie a možnosť exportovania do novej samostatnej série.
- Interaktívne zobrazenie kolmých MPR pozdĺž celej definovanej CPR cesty.

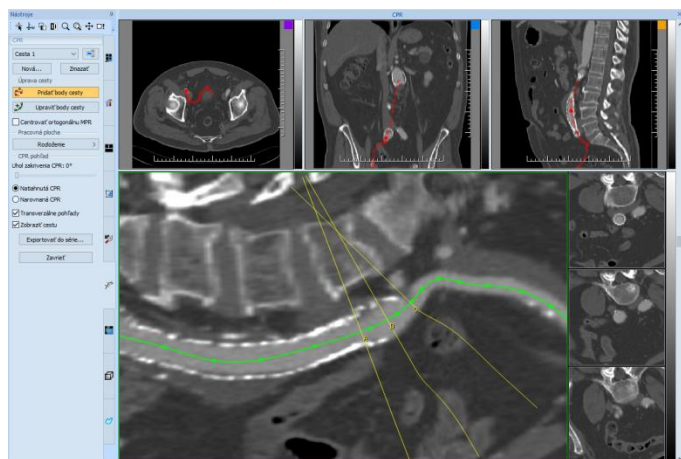

Konfigurovateľný Hlavný panel nástrojov

- Plne konfigurovateľný obsah hlavného panelu nástrojov vrátane definovania poradia tlačidiel.
- Možnosť pridania ľubovoľného TomoCon nástroja a jeho zobrazenia len pre vybranú skupinu modalít.

Pohodlnejšia práca s lekáorskými správami

- Lekárske správy dostupné priamo v palete náhľadov konkrétnej štúdie.
- Spoločné okno pre zobrazenie a úpravu všetkých otvorených správ vrátane písania nových správ.

Texty meracích nástrojov

- Možnosť vypnutia proporcionálneho zväčšovania textov meracích nástrojov pri zväčšovaní snímky.
- Nastavenie spôsobu prekryvania textov meracích nástrojov (tieň textov, prievitnosť).

Režim usporiadania štúdií v palete náhľadov

- Výber usporiadania štúdií priamo v palete náhľadov.
- Možnosti usporiadania na základe ID pacienta, dátumu štúdie a poradia otvorenia štúdie.

Vylepšenia pracovnej plochy

- Nový režim synchronizácie podľa prvého pohľadu.
- Nastavenie predvoleného režimu automatického zobrazovania snímok (zásobník, matica, všetko).
- Automatické skrývanie nástrojových dialógov na základe použiteľnosti pre modality otvorených štúdií.

Bližšie informácie ohľadom aktualizácie poskytnete naše Zákaznícke centrum (+421 2 60202324).

TomoCon GO

V blízkej budúcnosti pre vás pripravujeme úplne nový systém, ktorý vám umožní vizualizáciu snímok pacientov na širokej škále mobilných zariadení.

T3C®

bezpečný a spoľahlivý prenos obrazových dát

V roku 2015 sme okrem iných registrovali:

- ZDRAVOMAK s.r.o. – MR Topoľčany
- Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
- Nemocnica Banská Štiavnica

