



TatraMed Software

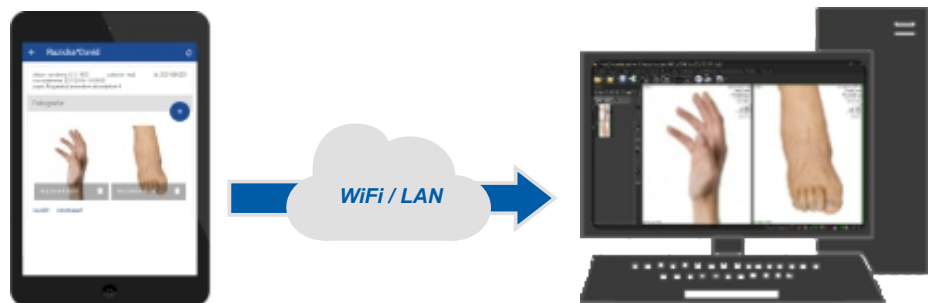

TomoCon[®] Camera

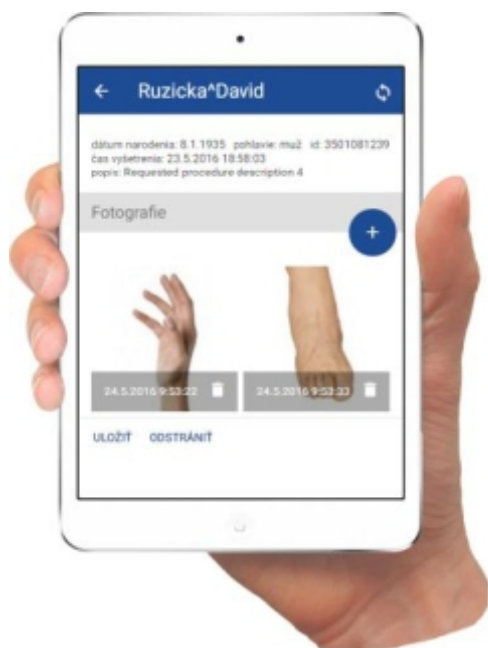

- Podpora súčasných mobilných prehliadačov
- Manuálne vytvorenie vyšetrenia
- Využitie kamery mobilného zariadenia
- Pridávanie a mazanie fotografií
- Služba existujúceho TomoCon PACS servera
- Vytváranie vyšetrení podľa žiadaniek (Modality Worklist)

TomoCon Camera je web aplikácia určená pre prenosné zariadenia. Umožňuje jednoduché ukladanie fotodokumentácie do PACS v podobe DICOM vyšetrenia.

Vlastnosti:

Aplikácia poskytuje používateľské rozhranie na snímanie fotodokumentácie pomocou kamery mobilného zariadenia. Fotografie vo vyšetrení je možné pred uložením do PACS prehliadať alebo odstrániť.

Vyšetrenie je možné vytvoriť manuálne alebo na základe žiadanky. Zoznam žiadaniek je filtrovaný pre každé zariadenie podľa nastaveného AE Title zariadenia. Viaceré zariadenia (napr. v rámci jedného oddelenia) môžu pracovať s rovnakým zoznamom žiadaniek.

Zabezpečenie aplikácie je prostredníctvom jednorazovej registrácie zariadenia, ktorá je autorizovaná správcom systému. Na správu a registráciu zariadení je vytvorené jednoduché administrátorské rozhranie.

Web aplikácia je prístupná ako služba existujúceho TomoCon PACS servera.

Systémové požiadavky:

Mobilné zariadenie:

- operačný systém iOS, Android alebo Windows Phone
- web prehliadač Safari, Chrome alebo IE
- vstavaná kamera pre tvorbu fotodokumentácie

TomoCon PACS server

Wi-Fi pripojenie

TatraMed[®] Software

TatraMed Software s.r.o., Líščie údolie 9
841 04 Bratislava 4, Slovenská republika
Tel: +421-2-60 20 23 01 Fax: +421-2-60 20 23 51
e-mail: info@tatramed.sk, http://www.tatramed.sk